

[www.sin-acne.com](http://www.sin-acne.com)



**ACCURE**  
FOR ACNE



**ACCURE**  
TECNOLOGÍA LASER REVOLUCIONARIA  
PARA EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ  
LEVE A SEVERO  
"ALGORITMO PATENTADO  
BASADO EN TEMPERATURA"

*ACCURE PARA ACNÉ  
LASER 1726 nm.*



**EXCELLENCE**  
MEDICAL

## ACCURE ES UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA LASER DE 1726 NM. BASADA EN EL MANEJO DE TEMPERATURA QUE PERMITE:

1. Crear un gradiente térmico en la piel hasta una profundidad de 0,5 a 1,5 milímetros y que llega específicamente a las glándulas sebáceas hiperactivas.
2. Entregar una serie controlada de pulsos de energía láser altamente específicos al área de tratamiento.
3. Alcanzar la temperatura epidérmica máxima (PET) específica en el área de tratamiento.
4. Desnaturalizar selectivamente las glándulas sebáceas hiperactivas controlando la temperatura del tratamiento en tiempo real mediante una cámara de infrarrojos y sistema de refrigeración "forced-air cooling system".



### RESULTADOS SIGNIFICATIVOS

ACCURE LASER SYSTEM está indicado en el tratamiento de Acné Vulgaris leve a severo. ACCURE LASER SYSTEM cuenta con la aprobación FDA.



Antes del tratamiento



3 meses después un Ciclo del tratamiento<sup>1</sup>




Antes del tratamiento



35 Meses después<sup>2</sup>

### PIEZA DE MANO LASER ACCURE

- Cuenta con una cámara térmica, desarrollada para una visualización rápida y precisa con Lector de temperatura de Piel.
- Equipado con un escáner y un sistema óptico para una distribución uniforme del láser en una matriz cuadrada de 2x2.
- Integra un sistema de refrigeración por aire para minimizar el riesgo de lesiones térmicas durante la terapia con láser.
- Utiliza una estrategia de pulsación especializada dirigida a los efectos térmicos para las glándulas sebáceas.

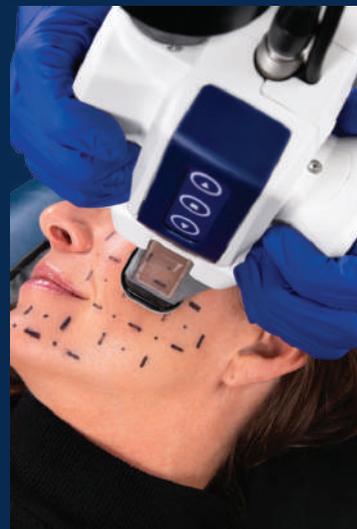

<sup>1</sup>Foto tomada 3 meses después de completar las 4 sesiones del ciclo 1 de tratamiento con 1 mes de intervalo entre cada sesión.

<sup>2</sup>Foto tomada 35 meses después de completar las 4 sesiones del ciclo 1 de tratamiento con 1 mes de intervalo entre cada sesión.

## ACCURE ES UN REVOLUCIONARIO DISPOSITIVO LASER DE 1726 nm.

Está diseñado para trabajar selectivamente sobre las glándulas sebáceas hiperactivas en pacientes con **ACNÉ VULGAR INFLAMATORIO** leve a severo. La interfaz láser y cada detalle en **ACCURE** están cuidadosamente diseñados para brindar una precisión de tratamiento, seguridad y comodidad del paciente incomparables.



**ACCURE**  
FOR ACNE



### SMART HANDPIECE

#### PIEZA DE MANO INTELIGENTE

Tecnología Inteligente con sensor integrado de temperatura y monitorización de piel en tiempo real con cámara de infrarrojo y sistema de enfriamiento "forced-air cooling system".

### SANITARY SINGLE-USE TIP

#### TIP DESCARTABLE

Cobertor Foam para un sellado hermético y comodidad del paciente.

### HANDPIECE HOLSTER

#### SOPORTE PARA PIEZA DE MANO LASER

Para apoyo y protección de la Piezas de Mano

### INTEGRATED FORCED AIR COOLING SYSTEM

#### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INTEGRADO

Diseñado para la protección de la piel tratada durante el procedimiento LASER.

### DOOR INTERLOCK (BACK)

#### PUERTA INTERLOCK (POSTERIOR)

Diseñado para proporcionar seguridad eléctrica en el entorno del funcionamiento del dispositivo.

### POWER CORD (BACK)

#### CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO (POSTERIOR)

Fuente de alimentación de 250V 30A, con enchufe NEMA L6-30

### CASTER WHEELS

#### RUEDAS

Ruedas giratorias de 360 grados, con modos de bloqueo duales.

### FULLY ADJUSTABLE ARM

#### BRAZO AJUSTABLE

Diseñado especialmente para un uso flexible de la pieza de mano inteligente y para facilitar el tratamiento del paciente.

### INTUITIVE INTERFACE AND ROTATING DISPLAY

#### INTERFAZ INTUITIVA Y PANTALLA GIRATORIA

Interfaz intuitiva, que permite visualizar la potencia emitida y la temperatura de la piel en tiempo real.

### KEY START

#### LLAVE DE ENCENDIDO

Para mejorar la seguridad y la gestión del acceso de los usuarios.

### EMERGENCY SWITCH

#### BOTÓN DE EMERGENCIA

### STORAGE DRAWER

#### CAJÓN DE ALMACENAMIENTO

Para seguridad y almacenamiento del interruptor de pedal.

### FOOTSWITCH

Pedal ergonómico para una mayor precisión y facilidad de uso durante el tratamiento.



**EXCELLENCE  
MEDICAL**

[www.sin-acne.com](http://www.sin-acne.com)

## LASER DE ALTA TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE ACNÉ CON 1726 nm.

**ACCURE** con su longitud de Onda 1726 nm. tiene como objetivo específico las glándulas sebáceas hiperactivas, preservando al mismo tiempo la piel sana circundante.

**ACCURE** es rápido y eficaz; las mejoras en la apariencia de la piel son visibles rápidamente con un mínimo de tiempo de inactividad y sin malestar.

**ACCURE** es un láser dirigido exclusivamente a prácticas dermatológicas, que puedan asegurar el más alto nivel de atención antes, durante y después del tratamiento.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### TIPO DE DISPOSITIVO

CLASIFICACIÓN LASER DE ACUERDO A: IEC / EN 60825-1:2014	Dispositivo Laser de uso médico 1726 nm. CLASE 4
HAZ DE LUZ IEC / EN 60825-1:2014	CLASE 3
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	200-240 V~; 50/60Hz; 3 kVA
TIPO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS.	CLASE I
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS	Type B
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA EL INGRESO DE LÍQUIDO	IP X0 (IEC 60529) para el dispositivo láser Advertencia: Accure Laser no está protegido contra el contacto e ingreso de líquidos. IP X8 (IEC 60529) para el pedal
MODO DE OPERACIÓN	CONTINUO
FUSIBLES	Interruptor termomagnético
DIMENSIONES	35.5 (profundidad) x 20.5 (ancho) x 43.5 (alto) (monitor cerrado) 35.5 (profundidad) x 20.5 (ancho) x 53 (alto)
PESO	170 kg.
TEMPERATURA DE OPERATIVIDAD	10°- 26° C / 50% de Humedad relativa; Temperaturas más altas de funcionamiento son posibles con humedades más bajas. La humedad superior al 50% reducirá la temperatura máxima de funcionamiento.
ALMACENAJE / TEMPERATURA DE TRANSPORTE	Mín. +5° C / Máx. + 40° C
HUMEDAD OPERATIVA	5% - 50% (no condensada)
PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE OPERATIVIDAD	De 800 hPa a 1060 hPa
ENTREGA DE HAZ LASER	FIBRA ÓPTICA + PIEZA SCANNER
EMISIÓN SONORA EN DECIBELES (DBA)	≤ 80
VIDA ÚTIL	10 AÑOS

\*Recomendaciones de Instalación Eléctrica: Sistema de Aterramiento Activo y UPS de 10kVA con conexión de salida y entrada NEMA L6-30.

FABRICADO POR:

**Quanta System**



FABRICADO PARA:

**ACCURE**



**EXCELLENCE  
MEDICAL**

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN PERÚ